


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Укладка-пенал для хранения и напоминания о приеме лекарств
«УПХЛ-01-«Елат»»

Назначение: Укладка-пенал многоразового применения предназначена для кратковременного суточного хранения таблеток и напоминания об их приеме в больничных и домашних условиях.

Рис.1 Общий вид
Укладки-пенала

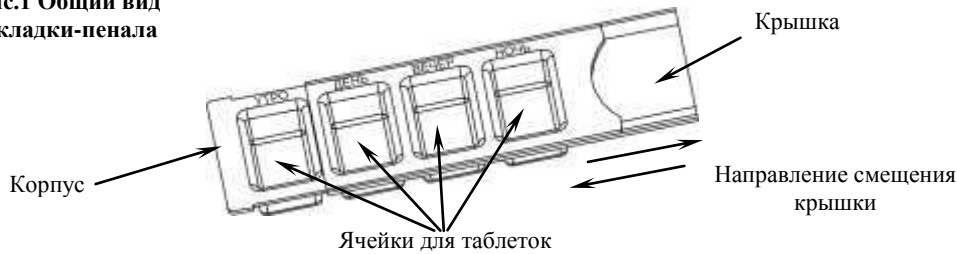

Комплект поставки:
Укладка-пенал в сборе - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Упаковка - 1 шт.


Технические характеристики:

Габаритные размеры укладки-пенала, мм, не более: 160x64x19 мм
Масса не более 50 гр.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Укладка-пенал для хранения и напоминания о приеме лекарств
«УПХЛ-01-«Елат»»

Назначение: Укладка-пенал многоразового применения предназначена для кратковременного суточного хранения таблеток и напоминания об их приеме в больничных и домашних условиях.

Рис.1 Общий вид
Укладки-пенала

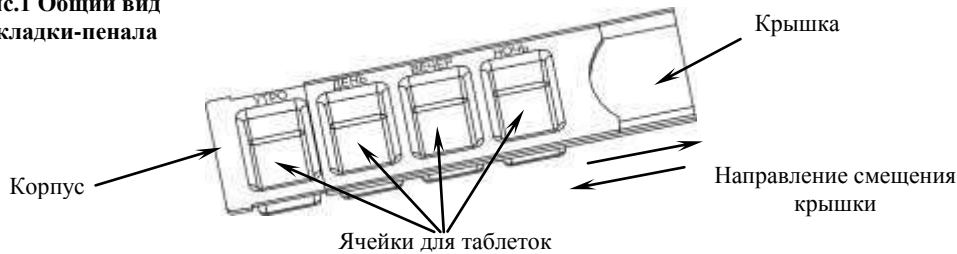

Комплект поставки:
Укладка-пенал в сборе - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Упаковка - 1 шт.

Технические характеристики:

Габаритные размеры укладки-пенала, мм, не более: 160x64x19 мм
Масса не более 50 гр.

Правила эксплуатации укладки-пенала

- К использованию укладки-пенала приступайте только после ознакомления с настоящей инструкцией.
- Оберегайте укладку-пенал от перегибов и ударов. Максимально допустимая температура воздействия на укладку-пенал не более (75⁺²) °С.
- При необходимости продезинфицируйте укладку-пенал способом двукратного протирания салфеткой из бязи или марли, смоченной в растворе дезинфицирующего средства, разрешенного к применению в медицине (в домашних условиях - в 1% растворе хлорамина или в 3% перекиси водорода).
- При загрязнении укладки-пенала вымойте ее теплой водой с мылом.
- При приеме таблеток и их укладке в соответствующие ячейки необходимо осторожным движением сдвигать крышку относительно корпуса в направлениях, указанных на рисунке.

Утилизация

Изделие после его эксплуатации подлежит утилизации по правилам, предусмотренными в Сан-Пин 2.1.7.2790-10 для отходов класса «Б».

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие качества укладки-пенала требованиям настоящей инструкции при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, указанных в настоящей инструкции.

Гарантийный срок - 18 месяцев со дня продажи.

Укладка-пенал для хранения и напоминания о приеме лекарств «УПХЛ-01-«Елат»» изготовлена и принята в соответствии с техническими условиями ТУ 9398-016-24320270-2005 и признана годной для эксплуатации.

Штамп ОТК _____ Дата упаковки _____

Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/08847 от 23.11.2016г.



ОМ № 23.92.07

Компания ЕЛАМЕД
Изготовитель: АО «Елатомский приборный завод»
Адрес: Россия, 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25
Тел./факс (49131) 2-04-57
E-mail: admin@elamed.com www.elamed.com

Правила эксплуатации укладки-пенала

- К использованию укладки-пенала приступайте только после ознакомления с настоящей инструкцией.
- Оберегайте укладку-пенал от перегибов и ударов. Максимально допустимая температура воздействия на укладку-пенал не более (75⁺²) °С.
- При необходимости продезинфицируйте укладку-пенал способом двукратного протирания салфеткой из бязи или марли, смоченной в растворе дезинфицирующего средства, разрешенного к применению в медицине (в домашних условиях - в 1% растворе хлорамина или в 3% перекиси водорода).
- При загрязнении укладки-пенала вымойте ее теплой водой с мылом.
- При приеме таблеток и их укладке в соответствующие ячейки необходимо осторожным движением сдвигать крышку относительно корпуса в направлениях, указанных на рисунке.

Утилизация

Изделие после его эксплуатации подлежит утилизации по правилам, предусмотренными в Сан-Пин 2.1.7.2790-10 для отходов класса «Б».

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие качества укладки-пенала требованиям настоящей инструкции при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, указанных в настоящей инструкции.

Гарантийный срок - 18 месяцев со дня продажи.

Укладка-пенал для хранения и напоминания о приеме лекарств «УПХЛ-01-«Елат»» изготовлена и принята в соответствии с техническими условиями ТУ 9398-016-24320270-2005 и признана годной для эксплуатации.

Штамп ОТК _____ Дата упаковки _____

Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/08847 от 23.11.2016г.



ОМ № 23.92.07

Компания ЕЛАМЕД
Изготовитель: АО «Елатомский приборный завод»
Адрес: Россия, 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25
Тел./факс (49131) 2-04-57
E-mail: admin@elamed.com www.elamed.com